

# Mode d'emploi Bovi-Bond 50 ml – Coller pour les Blocs REF : TA46139

Bovi-Bond™ est un adhésif de pointe, à prise rapide et à base d'uréthane, spécialement conçu pour fixer des blocs de bois ou de caoutchouc sous les sabots des bovins.


- Collage résistant et rapide ; Bovi-Bond prend en 30 secondes.
- Protocole simple.
- Sans émanation, inodore, utilisation en toute sécurité dans des locaux fermés.
- Le produit peut être stocké au froid ou au chaud.
- Conservation un an.

## Attention:

*Les zones humides, sanglantes ou infectées ne doivent pas être recouvertes. Attendre la guérison complète avant d'utiliser Bovi-Bond sur ces zones. La température d'utilisation idéale de Bovi-Bond se situe entre 18 °C et 30°C. En cas d'utilisation de blocs en caoutchouc, nettoyer avec de l'alcool dénaturé et sécher.*

## Préparation de la cartouche:

1. Enlever le capuchon.
2. Visser l'embout
3. Monter le piston.
4. Cartouche Prête à l'emploi

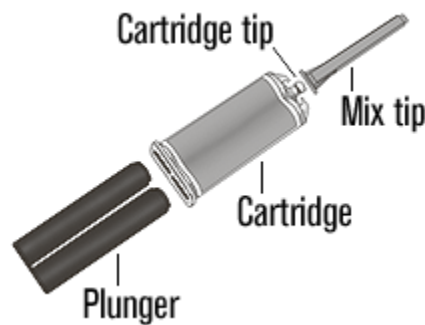

## Préparation du sabot:

1. Tailler, râper et niveler le sabot comme d'habitude (une meulette abrasive fait gagner du temps).
2. Sécher soigneusement le sabot avec un pistolet thermique ou un séchoir à cheveux.



## Application:

5. Appliquer rapidement une bande d'env. 15 mm de large de Bovi-Bond directement sur le bloc. La taille de la bande sera fonction des onglons.
6. Presser immédiatement le bloc doucement sur l'onglon propre et sec et maintenir ainsi pendant 20 secondes.
7. Ne pas chasser toute la colle. Laisser une épaisseur de 2 à 3 mm de colle entre le bloc et le sabot.
8. Le Bovi-Bond doit être DUR et supportera une charge au bout de 2 à 3 minutes environ



## Conseils pour une utilisation par temps froid:

1. Conserver les cartouches et les blocs à une température ambiante. Astuce: conserver les deux dans une "glacière" dans laquelle vous aurez déposé des packs chauffés aux micro-ondes ou bien dans des jarres d'eau CHAUDE. Le produit sortira facilement de la canule et prendra normalement.
2. Lorsque le temps est froid, après avoir comprimé le bloc revêtu de Bovi-Bond sur le sabot, chauffer (au pistolet thermique ou au séchoir à cheveux) pour accélérer la prise.
3. Attendre une minute de plus avant de reposer le sabot au sol.
4. Chauffer pendant 10-15 secondes.



**Bovi-Bond™**  
The 30 Second Block Adhesive

600 East Hueneme Road, Oxnard, CA 93033 USA  
(800) 483-8832 Fax: (800) 444-5170



Distribué au Canada par :  
[www.syrvetcanada.ca](http://www.syrvetcanada.ca)  
(800) 779-7838